



دفترچه راهنما

MX-02NS

ماساژور کتف و گردن

فهرست

نکات ایمنی (هشدار-احتیاط)	۲
ساختار محصول و کنترلر	۶
دستورالعمل استفاده	۶
نگهداری	۷
مشخصات فنی	۷

هشدار

برای استفاده بزرگسالان

مهم : افرادی که در ادامه ذکر می شوند قبلا از استفاده در منزل حتما با پزشک مشورت کنند :
 خانم های باردار، افرادی که دستگاه ضربان ساز قلب دارند، دارای دیابت هستند، دارای ترومبوز و التهاب رگ های خونی، افرادی که در معرض خطر لخته شدن خون هستند و یا افرادی که از لوازم پزشکی مصنوعی داخل بدن از قبیل پین، پیچ و یا مفصل های مصنوعی استفاده می

کنند.

درجه حرارت به اندازه کافی بالا هست که بدون توجه به تنظیمات کنترلی ممکن است باعث ایجاد سوختگی شود.

- از این ماساژور برای نوزاد، افرادی که خواب و یا هوشیار نیستند استفاده ننمایید.

- افرادی که پوستی حساس دارند و یا دچار گردش خون پایین هستند از این ماساژور استفاده نکنند.

- برای جلوگیری از تاول زدن نقطه تماس سطح گرم دستگاه با پوست را به دفعات کنترل کنید.

احتیاط

هشدارهای مهم امنیتی

قبل از استفاده باید تمام دستورالعمل‌های امنیتی و راه‌اندازی به دقت خوانده شوند، نسبت به انجام آن‌ها پایبند بود و با جدیت دنبال شوند. در هنگام استفاده از یک وسیله برقی، احتیاط‌های اولیه همیشه باید در نظر گرفته شوند از جمله موارد زیر :

برای کاهش خطر شوک الکتریکی، سطح پوششی ماساژور را باز نکنید. هیچ بخش قابل نگهداری در داخل وجود ندارد. برای کاهش خطر آتش‌سوزی و شوک الکتریکی، این دستگاه را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید.

خطر

- علامت فلش رعد و برق در یک مثلث همسطح بمنظور هشدار کاربر از وجود ولتاژ خطرناک در نزدیکی دستگاه در نظر گرفته شده است که می‌تواند برای ایجاد خطر شوک الکتریکی کافی باشد.

برای کاهش خطر شوک الکتریکی :

- همیشه بعد از استفاده و در هنگام تمیزکاری فوراً دو شاخه را از برق جدا نمایید.
- اقدامی برای برداشتن وسایل الکترونیکی که داخل آب افتاده‌اند نکنید، بلافاصله ۲ شاخه را از برق جدا نمایید.
- در هنگام دوش گرفتن و حمام از این دستگاه استفاده نکنید.

- علامت تعجب در یک مثلث همسطح بمنظور هشدار کاربر برای توجه به لزوم سرویس و نگهداری وسیله مورد استفاده شونده در نظر گرفته شده است.

استفاده نمی شود و یا مواقعی که باز و بسته می شود حتما دوشاخه را از برق جدا نمایید.

- زیر پتو و یا بالشت از دستگاه استفاده نکنید. گرمای بیش از حد ممکن است باعث آتش سوزی، شوک الکتریکی و یا آسیب به شخص شود. نظارت و کنترل در هنگام استفاده توسط کودکان و افراد ناتوان ذهنی الزامی است.

- از این دستگاه فقط برای استفاده در مواردی که در دفترچه راهنما قید شده است استفاده گردد. استفاده از متعلقات ساخته شده توسط کارخانه های دیگر توصیه نمی شود.

- در مواقعی که سیم برق و یا ۲ شاخه دچار آسیب دیدگی شده اند از دستگاه استفاده نکنید. اگر به درستی کار نمی کند، اگر ضربه خورده و آسیب دیده است و یا داخل آب افتاده است، بشخصه جهت تعمیر اقدام نکنید. دستگاه را جهت تعمیر به بخش فنی

- از قرار دادن در مکان هایی که امکان افتادن در داخل آب وجود دارد خودداری فرمایید. از قرار دادن ماساژور در داخل آب و سایر مایعات دیگر پرهیز کنید.

- به هیچ وجه از پین و یا سایر اتصالات فلزی همراه با این دستگاه استفاده نکنید.

- قبل از هر بار استفاده سطح پوششی را بررسی کنید. اگر سطح پوششی علائم از بین رفتگی قبیل شکستگی، ترک و ... بود استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

- در محیط های خیس و مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.

هشدار

بمنظور کاهش خطر سوختگی، آتش، شوک الکتریکی و یا آسیب به افراد :
- دستگاه نباید به هیچ وجه بدون استفاده رها شود. در مواقعی که

- از بارگیری بیش از حد برق خودداری
نمایید. فقط از منبع برق توصیه شده
استفاده گردد.
- بمنظور جلوگیری از خطر شوک
الکتریکی از جدا سازی و تعمیر
دستگاه خودداری فرمایید. تعمیر
نادرست ممکن است باعث ایجاد خطر
شوک الکتریکی و یا آسیب به شخص
در هنگام استفاده شود.
- هیچ وقت ۲ شاخه را با کشیدن
سیم برق جدا ننمایید.


ارسال نمایید.
- دستگاه را همراه با منبع تغذیه
حمل نکنید و یا از سیم بعنوان
دستگیره استفاده ننمایید.
- از خم کردن و یا له کردن در زمانی
که استفاده نمی شود خودداری
فرمایید.
- سیم برق را از تماس با سطوح گرم
دور نگه دارید.
- از وارد کردن اجسام به داخل محفظه
های ورودی خودداری فرمایید.
- در فضای باز استفاده نکنید. این
دستگاه برای استفاده در فضای بسته
و مصارف خانگی طراحی شده است.
- در مکان هایی که از محصولات
اسپری استفاده می شود و محدودیت
اکسیژن وجود دارد استفاده ننمایید.
- در مجاورت گازهای قابل انفجار و
قابل اشتعال مورد استفاده قرار نگیرد.
- برای خاموش کردن، تمامی کنترل
ها را در حالت خاموش قرار دهید،
آنگاه ۲ شاخه را از برق جدا نمایید.

ساختار محصول و کنترلر

۱. بخش اصلی (محصول)
۲. گوی های ماساژدهنده شیاتسو
۳. بخش کنترل تنظیمات
۴. دکمه خاموش / روشن
۵. گرما
۶. جهت دهی
۷. آداپتور
۸. سیم برق و ۲ شاخه

دستورالعمل استفاده

- برای استفاده در فضای بسته آداپتور را به ماساژور متصل نمایید. سیم برق آداپتور را به ۲ شاخه متصل نمایید.
- برای استفاده در ماشین سیم برق ماشین را به ماساژور متصل نمایید.
- سیم برق ماشین را به فندکی ماشین متصل نمایید.
- دسته های ماساژور را بگیرید و به طوری که گوی های ماساژ شیاتسو به درستی و راحتی روی گردن و شانه های شما قرار بگیرند دور گردن خود قرار دهید.
- دکمه خاموش / روشن را بر روی دستگیره ماساژور فشار دهید.
- دکمه گرما را برای گرم کردن گردن و شانه ها بر روی دستگیره ماساژور فشار دهید.
- دکمه های جهت دهی را برای تغییر جهت گوی های ماساژ در جهت و خلاف عقربه های ساعت فشار دهید.

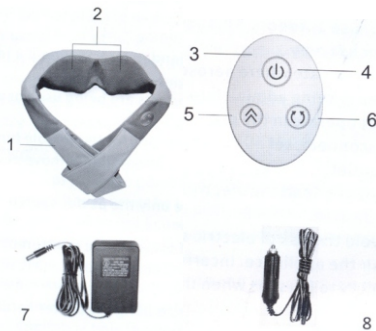

نکته :

فرمایید.

- عملکرد ماساژور بطور اتوماتیک بعد از ۱۵ دقیقه متوقف می شود.
- عملکرد حرارتی بصورت اتوماتیک وقتی که ماساژور خاموش می شود متوقف می گردد.

مشخصات فنی

ولتاژ	۱۲ ولت دی سی
قدرت	۲۴ وات

نگهداری

- ماساژور را در محیطی خشک، خنک و امن زمانی که استفاده نمی کنید قرار دهید.
- از یک پارچه خشک و مرطوب که آغشته به مواد غیر سابنده نیست جهت تمیز کاری استفاده نمایید. قبل از انجام این کار ۲ شاخه را از برق جدا نمایید.
- هیچ گاه ماساژور را به داخل مایعات وارد نکنید.
- از مجاورت مواد شوینده حلال و خشن خودداری فرمایید.
- از تعمیر ماساژور به شخصه خودداری