



دفترچه راهنما

روکش ماساژ

SF-642

با تشکر از خرید روکش ماساژور SF-642. بعنوان متخصص وفادار شما در مراقبت بهداشتی خانواده، این ماساژور نهایت راحتی در ماساژ و لذت یک زندگی سالم را برای شما به ارمغان می آورد. بمنظور رعایت ایمنی، استفاده صحیح و بدون درد سر از این محصول، قبل از استفاده دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید و برای رجوع به آن در مکان مناسب نگهداری نمایید.

فهرست

اطلاعات مهم.....	۱
ساختار محصول.....	۲
دستورالعمل استفاده.....	۲
دستورالعمل ریموت کنترل.....	۳
نگهداری.....	۴
عیب یابی.....	۵
مشخصات فنی.....	۵

۶. لطفا دکمه سوئیچ را بطور مکرر در مدت زمان کوتاه خاموش/روشن نکنید. ممکن است باعث ایجاد اختلال در عملکرد سوئیچ شود.

۷. در صورت شنیده شدن صدا در هنگام کار کردن روکش، این صدا ناشی از ساختار خود روکش می باشد و امری طبیعی است.

۸. برای امنیت، گوی های ماساژ پس از تحمل فشار بیش از حد متوقف خواهند شد. وقتی که گوی های ماساژ از موقعیت پایین تر به سمت بالا حرکت می کنند، شاید بدلیل وزن بدن متوقف شوند، اگر این مورد اتفاق افتاد کمی بدن خود را جابه جا کنید و اجازه دهید گوی های ماساژ به سمت بالا حرکت کنند.

۹. لطفا زمانی که بدن و موهیتان خیس است بر روی ماساژور ننشینید.

۱۰. در محیط های خیس و مرطوب از روکش استفاده ننمایید.

۱۱. در هنگام بارندگی و رعد و برق از روکش استفاده ننمایید و دو شاخه را از برق جدا نمایید.

۱۲. توصیه میشود قبل از استفاده از روکش یک لیوان آب ولرم بنوشید. این امر باعث افزایش گردش خون و تاثیر سم زدایی دارد. بعد از استفاده سوئیچ را خاموش کنید و دو شاخه را از برق جدا نمایید.

۱۳. در صورتی که حرفه ای نیستید از باز کردن و جدا کردن قطعات، سرویس و تعمیر خودداری فرمایید.

۱۴. در صورتی که روکش بدرستی کار نمی کند و رفتار غیر طبیعی دارد استفاده از آن را

۱. این روکش قابلیت تحمل وزن تا ۱۰۰ کیلوگرم را دارد. در صورت فشار بیش از حد ممکن است ساختار روکش و قطعات داخلی دچار آسیب دیدگی دائمی شوند. استفاده با وزن بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بمنزله استفاده نادرست در نظر گرفته می شود که این مورد تحت پوشش گارانتی نمی باشد.

۲. برای افرادی که در ادامه ذکر می شوند لطفا قبل از استفاده حتما با پزشک مشورت نمایند :

- خانم های باردار، بیماران، افراد ضعیف
- افرادی که از دستگاه ضربان ساز قلب و کنترل ضربان قلب استفاده می کنند و یا هر وسیله پزشکی دیگری که به راحتی تحت تاثیر الکترون قرار می گیرند.

- افراد با بیماری قلبی
- افرادی که از گرفتن ماساژ بدستور دکتر منع شده اند،

- افرادی که دچار خم شدگی غیرطبیعی ستون فقرات هستند.

- افرادی که دارای زخم های حاد هستند.

۳. لطفا از نشستن بر روی ریموت کنترلر و پرت کردن آن خودداری فرمایید. لطفا از کشیدن بیش از حد سیم برق و سیم ریموت کنترلر خودداری فرمایید.


۴. در هنگام استفاده از روکش زاویه خمیدگی نباید بیشتر از ۲۰ درجه باشد. استفاده در حالت دراز کش ممنوع است.

۵. لطفا از کشیدن اجسام تیز بر روی روکش پرهیز کنید. اجازه ندهید سیگار روشن و یا خاکستر سیگار بر روی روکش بریزد.

متوقف کنید و سوئیچ را خاموش کنید.

۱۵. این دستگاه قابل استفاده در منزل می باشد. امکان استفاده بعنوان تجهیزات پزشکی وجود ندارد. در صورت احساس ناراحتی استفاده از روکش را متوقف کنید.

۱۶. بمنظور رعایت نکات ایمنی در صورت بروز آسیب بر روی سیم برق، حتما باید توسط بخش فنی جهت رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی تولید تعویض گردد.

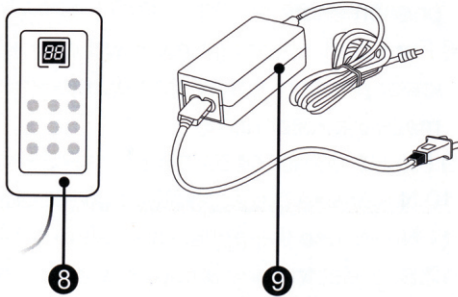

۱. بالشت

۲. پستی

۳. گوی های ماساژ

۴. روکش (موتور و بیره داخلی)

۵. سیم اتصال پستی به نشیمنگاه

۶. اتصال دی سی

۷. پیچ ثابت (برای استفاده بار اول،

پیچ ثابت را باز کنید.)

۸. ریموت کنترل

۹. آداپتور

- برای اطمینان از اینکه کودکان با این وسیله بازی نمی کنند باید توسط بزرگترها تحت نظارت قرار بگیرند .

- این دستگاه برای استفاده افراد از قبیل کودکان، افرادی که ناتوانی جسمی، حسی و ذهنی و یا کمبود دانش و تجربه دارند توصیه نمی شود. مگر اینکه تحت نظارت افرادی که مسئول امنیتشان هستند و دستورالعمل استفاده را انتقال داده اند، قرار بگیرند.

دستورالعمل استفاده

۱. لطفا برای استفاده اولیه پیچ ثابتی که در پشت قرار دارد را بردارید و مجددا نصب نکنید.


۲. سیم اتصال پستی و نشیمنگاه روکش را به هم وصل کنید.

۳. آداپتور را به خروجی نشیمنگاه بدرستی متصل نمایید.

۴. منبع برق را متناسب با ولتاژ در نظر گرفته شده برای روکش انتخاب کنید.

۵. دکمه خاموش/روشن را فشار دهید، براساس نیاز خود تنظیمات ریموت کنترل را انجام

ساختار محصول

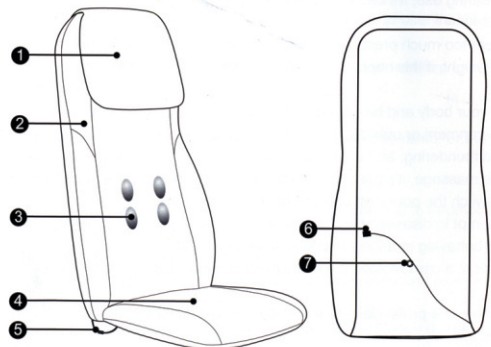


دهید و برنامه ماساژ مورد نظر را انتخاب کنید.

۶. سعی کنید در طول ماساژ راحت باشید.

۷. بعد از استفاده، ۲ شاخه را از برق جدا نمایید و دستگاه را در جای مناسب نگهداری کنید.

دستورالعمل ریموت کنترل

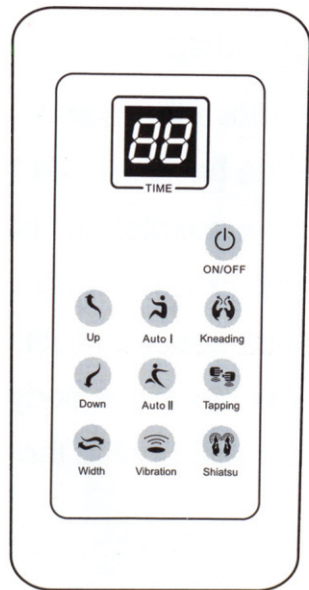

۱. **ON/OFF**: در حالت خاموش، دکمه ON/OFF را فشار دهید. صفحه نمایش زمان ۱۵ دقیقه را نمایش می دهد و شروع به شمارش می کند. وقتی صفحه نمایش خاموش روشن می شود و پیغام می دهد که گوی های ماساژ در حال حرکت به سمت بالا هستند و صدایی شبیه "دی دی ... " شنیده می شود. در زمانی که این صدا شنیده می شود می توانید دکمه

های بالا یا پایین را بمنظور حرکت گوی های ماساژ و تنظیم ارتفاع کتف ها فشار دهید. بعد از صدای "دی دی ... " می تواند به صورت ستاره ای از موقعیت شانه ها تا پایین ماساژ دهد. (توجه: بعد از اینکه صدای "دی دی ... " متوقف شد اگر تنظیم ارتفاع شانه ها به اتمام نرسیده بود، گوی های ماساژ از بالا تا پایین روکش شروع خواهند کرد.)

۲. **AUTO I**: این یک برنامه است، ماساژ بر روی موقعیت گردن و کتف تمرکز می کند. دکمه را فشار دهید، صفحه A1 را نمایش می دهد. برنامه ماساژ اتوماتیک شروع می شود. دکمه را مجدد فشار دهید، A0 را نمایش می دهد. وارد برنامه تنظیم دستی می شود. می تواند عملیات ضربه ای و مالشی را بصورت دستی کنترل کند.

۳. **AUTO II**: این یک برنامه است، ماساژ بر روی موقعیت کمر تمرکز می کند. دکمه را فشار دهید، صفحه A2 را نمایش می دهد. برنامه ماساژ اتوماتیک شروع می شود. دکمه را مجدد فشار دهید، A0 را نمایش می دهد. وارد برنامه تنظیم دستی می شود. می تواند عملیات ضربه ای و مالشی را بصورت دستی کنترل کند.

۴. **KNEADING**: دکمه را فشار دهید. صفحه نمایش P1 را نمایش می دهد. شروع به ماساژ مالشی می کند. مجدداً دکمه را فشار دهید تا شدت ماساژ را تنظیم کند. سه سطح شدت P1، P2 و P3 قابل انتخاب است. وقتی که صفحه نمایش P0 را نمایش می دهد ماساژ

نگهداری

۱. روکش را از گرد و خاک تمیز نگه دارید و در محیط هایی با رطوبت بالا نگهداری نکنید.

۲. در مکان های با فشار بالا نگهداری نکنید. برای مدت زمان طولانی در معرض مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

۳. از مواد شوینده و تمیز کننده از قبیل تینر، الکل و سفید کننده برای تمیز کردن روکش استفاده نکنید.

۴. برای نگهداری، از یک پارچه خشک برای تمیز کردن روکش استفاده کنید. هیچ وقت از یک پارچه خیس و مرطوب برای تمیز کردن روکش و سیم برق استفاده نکنید.

متوقف می شود.

۵. **TAPPING**: دکمه را فشار دهید. صفحه نمایش C1 را نمایش می دهد. شروع به ماساژ ضربه ای می کند. مجدداً دکمه را فشار دهید تا شدت ماساژ را تنظیم کند. سه سطح شدت C1، C2 و C3 قابل انتخاب است. وقتی که صفحه نمایش C0 را نمایش می دهد ماساژ متوقف می شود.

۶. **VIBRATION**: دکمه را فشار دهید. نشیمنگاه شروع به لرزیدن می کند. فشار مجدد دکمه باعث توقف لرزش می شود.

۷. **WIDTH**: دکمه را فشار دهید. می تواند گوی های ماساژ را در محدوده ۳ فاصله مختلف تنظیم کند. قابل تنظیم در ۳ محدوده. (در حالت ماساژ مالشی، محدوده قابل تنظیم نیست.)

۸. **SHIATSU**: دکمه را فشار دهید. ماساژ شیاتسو شروع می شود. وقتی که صفحه نمایش E1 را نمایش می دهد، گوی های ماساژ بصورت اتوماتیک بالا و پایین می روند. دکمه شیاتسو را مجدداً فشار دهید، صفحه نمایش E0 را نمایش می دهد. وارد حالت دستی میشود. می توانید دکمه های بالا و پایین را برای تنظیم موقعیت مکانی گوی های ماساژ دهنده فشار دهید و از یک ماساژ نقطه ای لذت ببرید.

۹. **UP**: می تواند گوی های ماساژ دهنده را برای حرکت به سمت بالا کنترل کند. (تحت حالت E0)

۱۰. **Down**: می تواند گوی های ماساژ دهنده را برای حرکت به سمت پایین کنترل کند. (تحت حالت E0)

عیب	دلیل احتمالی	راه حل
بعد از اتصال به برق روکش شروع به فعالیت نمی کند	روکش روشن نشده است	مطمئن شوید با فشار دکمه روشن/خاموش روکش روشن شده است
	اتصال بین آداپتور و سیم برق بدرستی برقرار نشده است	مطمئن شوید سیم برق محکم به ۲ شاخه برق و آداپتور متصل شده است
روکش بطور ناگهانی در حین استفاده متوقف شده است	۱۵ دقیقه ماساژ به اتمام رسیده است و دستگاه بطور اتوماتیک در حالت آماده باش قرار گرفته است	برای ماساژ مجدد، دکمه خاموش را فشار دهید و روکش را مجدداً روشن کنید
	استفاده بیش از حد، بمنظور حفاظت از گرم شدن موتور	روکش را خاموش کنید، بعد از سرد شدن موتور می توانید مجدداً استفاده کنید.
	فشار بیش از حد بر روی روکش	بدن را کمی بلند کنید
صدا از روکش شنیده می شود (صدای ماساژ مالشی و ضربه ای)	این صدا ها ناشی از ساختار مکانیکی دستگاه است	این صدا طبیعی است
سیم برق آسیب دیده است. روکش بوی دود می دهد	دستگاه را متوقف کنید و با یخس فنی تماس حاصل فرمایید	

مشخصات فنی

نام محصول	روکش ماساژور
مدل	SF-642
ولتاژ	DC 24V/4A
مدت زمان استفاده	۱۵ دقیقه

آداپتور ای سی	پارامتر
ورودی	AC100-240V 50/60Hz
خروجی	DC 24V/4A